

UROFLOW-RECORDER URO-2050

Standardgerät zur Registrierung
des Harnflusses



- **Messwertgewinnung** - nach dem Wägeprinzip
- **LCD-Bildschirm** - für Online-Darstellung
- **Protokollausdruck** - für alle relevanten Daten
- **Speicherfunktion für ca. 50 Protokolle** - gespeicherte Daten können im Display wieder aufgerufen und auf Wunsch ausgedruckt werden
- **Start - Stop Automatik** - oder manuelle Betriebsweise wählbar
- **Automatischer Selbsttest** - nach dem Einschalten des Gerätes
- **Echtzeituhr** - automatischer Eindruck von Tag/ Monat/ Jahr und Uhrzeit
- **Robuste Bauweise** - auch für Wandmontage lieferbar


UROFLOW-RECORDER URO-2050

Technische Daten

Netzanschluss	100 ... 240 V, 50/60 Hz	
Abmessungen	240 x 160 x 110 mm (B x T x H)	
Gewicht	1,8 kg (ohne Zubehör)	
Stativ	Höhe 80 cm	
Elektrische Sicherheit	DIN EN 60601-1 Klasse IIa nach EG-Richtlinie 93/42/EWG	
Messbereich Flow	25 ml/s und 50 ml/s	
Messbereich Volumen	2.000 ml	
Schreibgeschwindigkeit	2 mm/s (Display)	
Kopiergeschwindigkeit	25 mm/s	
Registrierverfahren	Thermodrucker, 384 Punkte, 200 dpi	Stativ mit Messwertgeber
Papierbreite	60 mm	
Registrierbreite	48 mm	
Auflösung	numerisch 0,1 ml/s grafisch 0,15 ml/s bzw. 0,3 ml/s	
Grenzfrequenz	ca. 2 Hz	
Betriebsart	manuell oder automatisch Bei automatischem Betrieb Start bei etwa 2 ml, Registrierstop ca. 20 s nach Beendigung des Harnflusses oder manuell durch den Untersucher.	
Digitale Schnittstelle	optisch IrDA	
Berechnete Messwerte	Miktionszeit, Flowzeit, max. Flow, Zeit bis max. Flow, durchschnittlicher Flow, max. Flowzunahme, Volumen ca. 50 Protokolle bei einer durchschnittlichen Miktionsdauer von 40 s, automatisches Einfügen von Datum und Uhrzeit der Messung. Daten bleiben nach Ausschalten des Gerätes erhalten. Übertragung der Daten auf PC nach der Messung oder später möglich.	
Speicherung		
Sprache	deutsch, englisch	



Originalausschrieb einer Messung

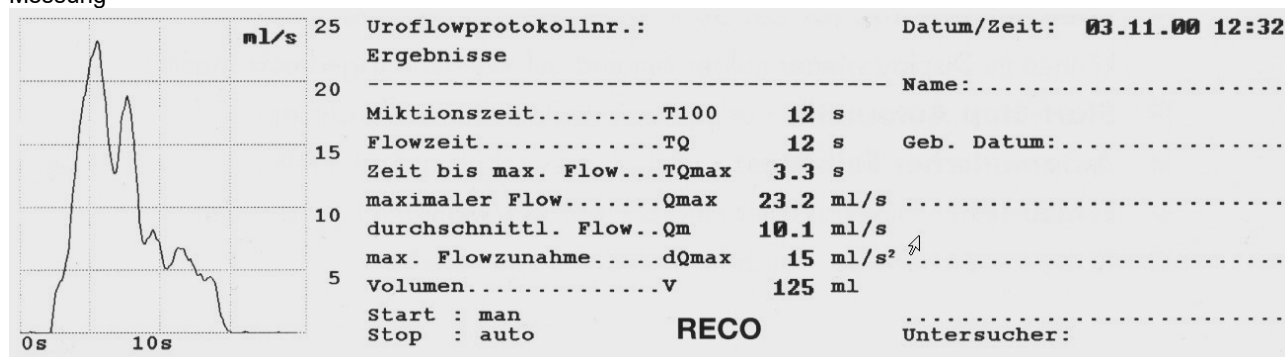

Änderungen vorbehalten



RECO MEDIZINTECHNIK
Wolfgang Rentsch e. K.
 Altjessen 2, D-01796 Pirna
GERMANY

Tel +49-3501- 56 99 0
 Fax +49-3501- 56 99 20
 Email info@recomedical.com
 Internet www.recomedical.com